


KATALOG DRENÓW



DRENY DO OPŁUCNEJ

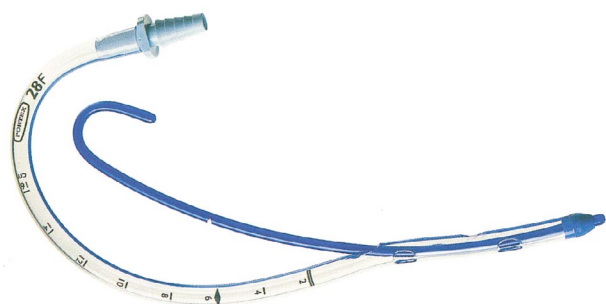

PUNKCJA



DRENAŻ RAN



DRENY KANAŁOWE



POJEMNIKI PODCIŚNIENIOWE



AKCESORIA

SPIS TREŚCI

DRENY DO OPŁUCNEJ

DRENY ŚRÓDOPERACYJNE THORAX Z PCW.....	4
DRENY ŚRÓDOPERACYJNE THORAX Z SILIKONU.....	5
DRENY Z TROKAREM Z PCW.....	6
DRENY Z PROWADNICĄ DO UKSZTAŁTOWANIA.....	7
AMBULATORYJNY SYSTEM DRENAŻU OPŁUCNEJ Z DRENEM.....	8
AMBULATORYJNY SYSTEM DRENAŻU OPŁUCNEJ.....	9
ZASTAWKA HEIMLICH.....	10

PUNKCJA

ZESTAW DO PUNKCJI OPŁUCNEJ.....	11
ZESTAW UNICO® Z IGŁĄ VERESSA.....	12

DRENY DO RAN

DRENY BRZUSZNE.....	14
ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA.....	15
DRENY JACKSON-PRATT Z SILIKONU.....	16
DRENY DACHÓWKOWE Z PCW.....	17
DRENY TKANKOWE Z PCW.....	17
DRENY PENROSE Z SILIKONU.....	18
DRENY REDON Z PCW.....	19
DRENY KEHR'A.....	20

DRENY KANAŁOWE

DRENY KANAŁOWE Z SILIKONU - SMART.....	21
DRENY KANAŁOWE - COAXIAL.....	22
SPIRALNE DRENY KANAŁOWE Z SILIKONU.....	23

POJEMNIKI PODCIŚNENIOWE

POJEMNIKI TYPU BELLOWS Z PCW.....	24
POJEMNIKI TYPU BELLOWS Z PCW Z WORKIEM.....	25
POJEMNIKI PODCIŚNENIOWE Z SILIKONU.....	26


AKCESORIA

ŁĄCZNIKI DO DRENÓW.....	27
ŁĄCZNIKI DO DRENÓW.....	28
DRENY SILIKONOWE.....	30

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.....	31
---	----

DRENY ŚRÓDOPERACYJNE THORAX Z PCW

proste i wygięte

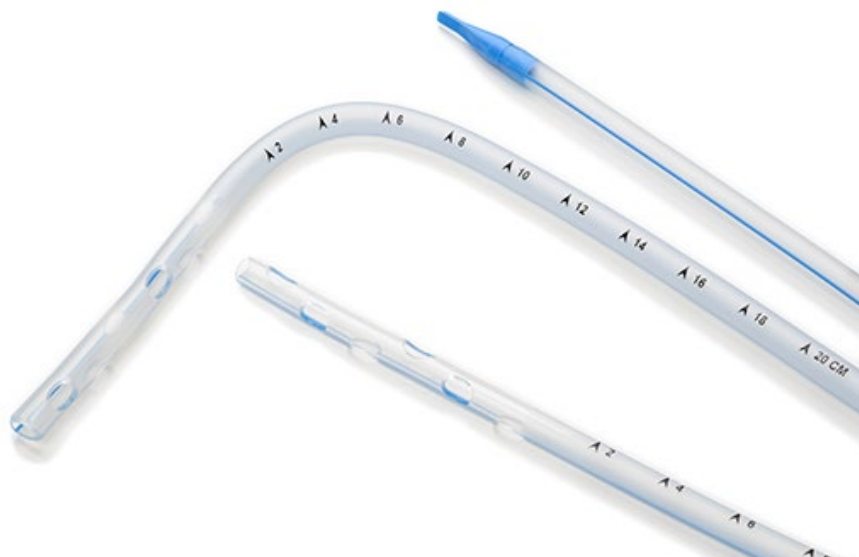

- › wykonane z gładkiego, odpornego na załamania PCW
- › przeznaczone do wstecznego wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego
- › dostępne w dwóch wersjach (proste/ wygięte)
- › zakończone stożkiem gładko połączonym z drenem z płaskim uchwytem do peana
- › duże, gładko wykończone otwory zmniejszają traumatyczność wprowadzenia drenu oraz zapewniają skuteczny drenaż
- › oznaczenia rozmiaru na drenie i łączniku, niebieska linia kontrastująca w promieniach RTG, oraz znaczniki głębokości co 2 cm
- › dostarczane z łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej pozwalającym na łatwe i szybkie połączenie z zestawem do drenażu
- › sterylne, podwójnie opakowane wraz z łącznikiem


dreny proste	dreny wygięte	rozmiar	długość
21016	20916	16 Ch	450 mm
21020	20920	20 Ch	450 mm
21024	20924	24 Ch	450 mm
21028	20928	28 Ch	450 mm
21030	20930	30 Ch	450 mm
21032	20932	32 Ch	450 mm
21036	20936	36 Ch	450 mm
21040	20940	40 Ch	450 mm

opakowanie zbiorcze: 210xx – 25 sztuk; 209xx – 10 sztuk

AKME

DRENY ŚRÓDOPERACYJNE THORAX Z SILIKONU

proste i wygięte

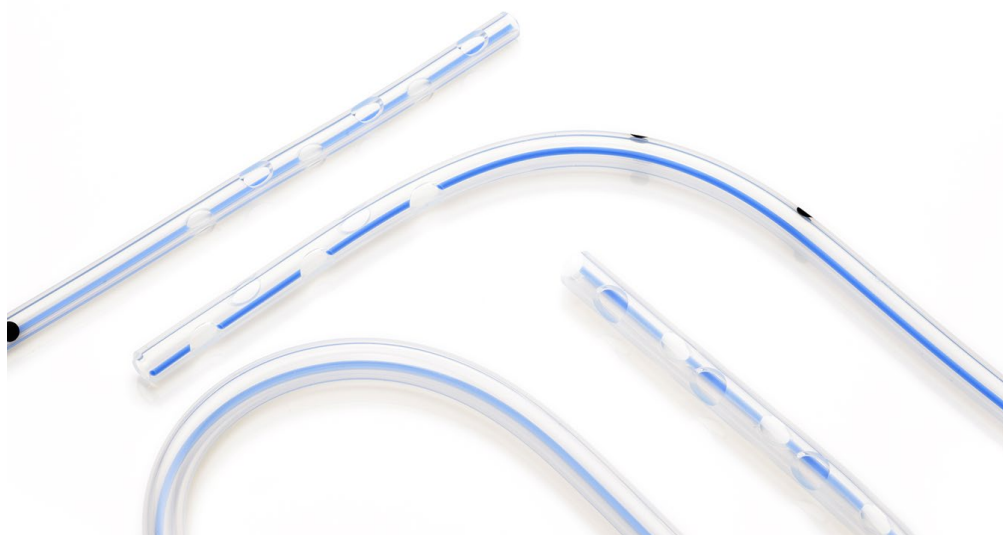

- › wykonane z miękkiego, czystego silikonu
- › przeznaczone do wstecznego wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego
- › dostępne w dwóch wersjach (proste/ wygięte)
- › zakończone skośnie, co pozwala na pewny chwyt przy pomocy peana
- › duże, gładko wykończone otwory zmniejszają traumatyczność wprowadzenia drenu oraz zapewniają skuteczny drenaż
- › dwa znaczniki głębokości, pierwszy w odległości 5 cm od ostatniego otworu, niebieska linia kontrastująca w promieniach RTG
- › sterylnie, podwójnie opakowane

dreny proste	dreny wygięte	rozmiar	długość
20812	-	12 Ch	500 mm
20815	-	15 Ch	500 mm
20818	-	18 Ch	500 mm
20821	-	21 Ch	500 mm
20824	21824	24 Ch	500 mm
20828	21828	28 Ch	500 mm
20830	21830	30 Ch	500 mm
20833	21833	33 Ch	500 mm
20836	21836	36 Ch	500 mm

opakowanie zbiorcze 20 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

DRENY Z TROKAREM Z PCW

otwarte i zamknięte



- › dreny miękkie, odporne na załamanie, gładkie, wykonane z termoplastycznego PCW z metalowym trokarem
- › oznaczenia rozmiaru na trokarze i drenie, niebieska linia widoczna w promieniach RTG
- › płaski uchwyt z oznaczeniem rozmiaru ułatwiający wprowadzenie i manipulowanie drenem
- › zakończone miękką niebieską końcówką
- › dostępne w dwóch wersjach trokara: ostry (trójkąt) i tępy
- › gładko wykończone otwory zmniejszają traumatyczność wprowadzenia drenu
- › trzy otwory boczne w drenach z trokarem tępym, dwa boczne i jeden końcowy w drenach z trokarem ostrym
- › znaczniki głębokości co 2 cm
- › integralna końcówka dostosowana do łącznika schodkowego
- › opakowanie zawiera osłonę na ostrą końcówkę trokara
- › sterylne, podwójnie opakowane

trokar tępy	rozmiar / długość	trokar ostry	rozmiar / długość
21108	8 Ch / 22 cm	-	-
21110	10 Ch / 22 cm	-	-
21112	12 Ch / 25 cm	-	-
21116	16 Ch / 25 cm	11216	16 Ch / 27 cm
21118	18 Ch / 25 cm	-	-
21120	20 Ch / 40 cm	11220	20 Ch / 42 cm
21124	24 Ch / 40 cm	11224	24 Ch / 42 cm
21128	28 Ch / 40 cm	11228	28 Ch / 42 cm
21132	32 Ch / 40 cm	11232	32 Ch / 42 cm

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

DRENY Z PROWADNICĄ DO UKSZTAŁTOWANIA

standardowe i miękkie z PCW



- › wykonane z gładkiego, odpornego na załamania PCW
- › dostępne w dwóch wersjach (standardowe/ miękkie)
- › duże, gładko wykończone otwory zmniejszają traumatyczność wprowadzenia drenu oraz zapewniają skuteczny drenaż
- › oznaczenia rozmiaru na drenie, niebieska linia kontrastująca w promieniach RTG, oraz znaczniki głębokości co 2 cm
- › plastyczna prowadnica o długości 28 cm, pozwala na ukształtowanie drenu
- › prowadnica posiada znacznik potwierdzający właściwe położenie w drenie, dopasowany do średnicy wewnętrznej
- › sterylne

dreny miękkie	dreny standardowe	rozmiar
200/804/200	200/806/200	20 F
200/804/240	200/806/240	24 F
200/804/280	200/806/280	28 F
200/804/320	200/806/320	32 F
200/804/360	200/806/360	36 F


opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

AMBULATORYJNY SYSTEM DRENAŻU OPŁUCNEJ

zestaw z drenem

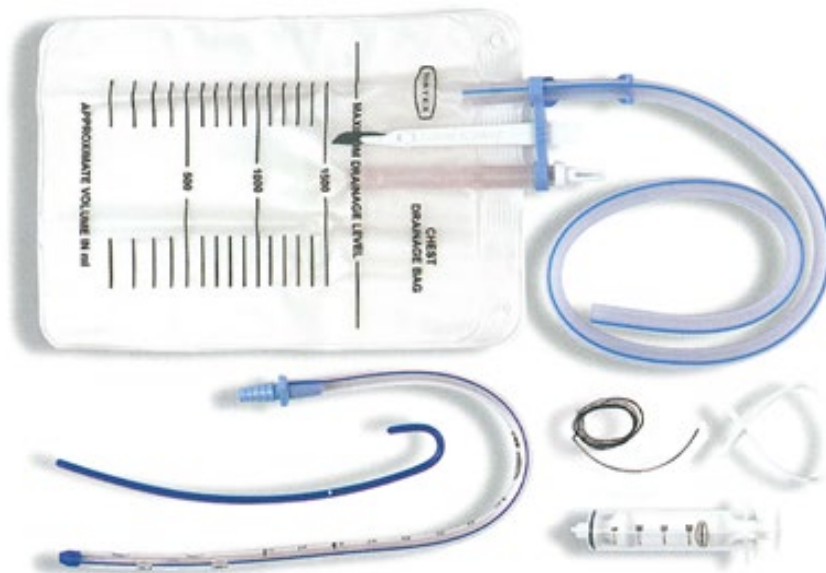

- › zestaw do szybkiej torakotomii i założenia drenażu w stanach zagrożenia życia
- › możliwość użycia na miejscu wypadku, na SOR-ach, w urazowej izbie przyjęć oraz w oddziałach szpitalnych
- › idealne rozwiązanie dla pacjentów mobilnych oraz transportowanych
- › standardowy dren z PCW z prowadnicą do ukształtowania i z łącznikiem stożkowym
- › worek z zaworem zapobiegającym powrotowi drenowanego płynu/ powietrza
- › sterylne

ELEMENTY ZESTAWU

- › dren z prowadnicą do ukształtowania
- › worek 1700 ml z zastawką płatkową zapobiegającą powrotowi drenowanego płynu/ powietrza
- › strzykawka luer-lock 20 ml
- › łącznik stożkowy
- › skalpel nr 10
- › opakowanie szwów nr 0
- › sterylna serweta
- › pasek na ramię

numer katalogowy	rozmiar drenu
200/901/280	28 F
200/901/320	32 F
200/901/360	36 F

opakowanie zbiorcze 5 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

AMBULATORYJNY SYSTEM DRENAŻU OPŁUCNEJ

bez drenu



- › alternatywa dla drenażu aktywnego, stosowana po planowych lub ostrych zabiegach chirurgicznych
- › idealne rozwiązanie dla pacjentów mobilnych oraz transportowanych nie wymagających aktywnego ssania
- › worek z zastawką płatkową zapobiegającym powrotowi drenowanego płynu/ powietrza
- › sterylne

ELEMENTY ZESTAWU

- › worek 1700 ml z drenem łączącym ze zintegrowaną zastawką płatkową
- › strzykawka luer-lock 20 ml
- › łącznik stożkowy
- › pasek na ramię
- › pasek mocujący do łóżka

numer katalogowy

200/905/000

opakowanie zbiorcze 5 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

ZASTAWKA HEIMLICHACHA z workiem lub bez



- › zastawka płatkowa zapobiegająca cofaniu się odprowadzającego płynu do pacjenta
- › zakończona obustronnie łącznikami schodkowymi umożliwiającymi połączenie jej z workiem oraz drenem pacjenta
- › w zestawie dostępna również z workiem o pojemności 2000 ml wyskalowanym co 100 ml z kranikiem spustowym oraz zaworem odpowietrzającym
- › dren łączący między workiem a zastawką Heimlichach o długości 50 cm
- › łącznik luer lock / wejście dla łącznika schodkowego
- › sterylna, podwójnie opakowana

numer katalogowy	opis
10530	zastawka Heimlichach
10531	zastawka Heimlichach z workiem

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

ZESTAW DO PUNKCJI OPŁUCNEJ

metodą Seldingera



- › zestaw do punkcji jamy opłucnej i drenażu
- › zestaw oparty na metodzie Seldingera z zastosowaniem prowadnicy
- › sterylny, opakowanie typu blister

ELEMENTY ZESTAWU

- › dren do opłucnej 12 F długości 28,5 cm z dwoma otworami bocznymi oraz jednym końcowym
- › igła wprowadzająca Tuohy 16 G o długości 80 mm
- › prowadnica z zakończeniem typu „J” z aplikatorem
- › rozszerzadło 14G
- › skalpel nr 11
- › strzykawka 10 ml
- › kranik 3-drożny
- › łącznik luer- lock męski/ stożkowy

numer katalogowy

200/910/120

rozmiar drenu

12 F/ 30 cm

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl


ZESTAW UNICO® Z IGŁĄ VERESSA do bezpiecznej punkcji



- › zestaw do punkcji jamy opłucznej umożliwiający również drenaż otrzewnej oraz worka osierdziowego
- › zestaw posiada system automatycznych zastawek jednokierunkowych z możliwością przełączenia w tryb grawitacyjny
- › cewnik wykonany z termoplastycznego widocznego w promieniach RTG poliuretanu może pozostawać w ciele pacjenta przez 29 dni

CECHY ZESTAWU

- › bezpieczny dzięki zastosowaniu igły Veressa oraz systemu automatycznych zastawek
- › automatyczne zastawki umożliwiają mechaniczny drenaż bez konieczności przełączania zaworu
- › drenaż grawitacyjny i aktywny (po podłączeniu zestawu drenażowego z aktywnym ssaniem) jest możliwy po przełączeniu zaworu
- › cewnik wykonany z poliuretanu zmniejsza ryzyko załamania i okluzji
- › zestaw z cewnikiem w trzech rozmiarach 9 Ch 12 Ch i 15 Ch, cewnik w wersji: prostej standardowej; prostej przedłużonej oraz z zawiniętą końcówką typu Pig Tail
- › zestaw bez cewnika (Unico Base) z igłą Veressa 13G, z linią dystansującą układ zastawek od igły
- › unikalna linia przedłużająca o długości 50 cm (w wybranych zestawach) pozwala na odsunięcie zastawki od ciała pacjenta zwiększając jego komfort oraz zmniejszając ryzyko powikłań (ból, martwica, odleżyny, zakażenie)
- › zestaw z prowadnicą Seldingera pozwala na optymalną kontrolę przy pozycjonowaniu cewnika (wprowadzenie prowadnicy przez igłę Veressa)
- › łatwe i bezpieczne re-pozycjonowanie cewnika w ciele pacjenta
- › możliwość pomiaru przecieku oraz podłączenia różnych systemów drenażowych
- › w każdym zestawie z cewnikiem: bezpieczna igła Veressa, worek o pojemności 2000 ml z kranikiem spustowym i kanałem odpowietrzającym, skalpel, łącznik do systemu drenażowego

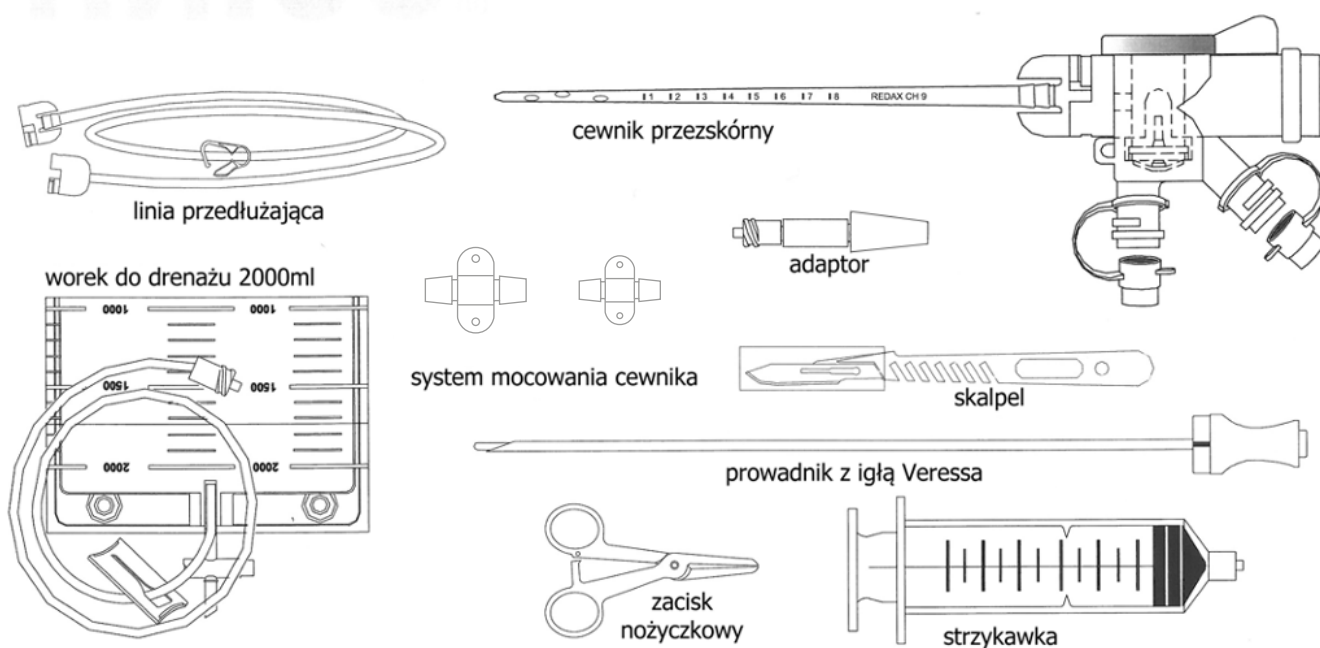

zestaw Unico w wersji rozszerzonej

numer katalogowy	rodzaj cewnika	rozmiar	linia przedłużająca
10800	prosty	9 Ch	-
10801	prosty	12 Ch	-
10802	prosty	9 Ch	+
10803	prosty	12 Ch	+
10830	prosty	15 Ch	+
10810	prosty Forty	9 Ch	+
10812	prosty Forty,	12 Ch	+
10816	Pig Tail	9 Ch	-
10817	Pig Tail	12 Ch	-
10818	Pig Tail	9 Ch	+
10819	Pig Tail	12 Ch	+
10831	Pig Tail	15 Ch	+
10820	prosty XL	9 Ch	+
10821	prosty XL	12 Ch	+
10823	Seldinger	9 Ch	+
10824	Seldinger	12 Ch	+
10815	-	igła 13G	-
10808	silikonowy mieszek	100 ml	-

DRENY BRZUSZNE z silikonu



- › wykonane z miękkiego silikonu
- › przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego
- › gładko wykończone otwory zmniejszają traumatyczność wprowadzenia drenu
- › otwór końcowy i naprzeciwległe rozmieszczone otwory zapewniają skuteczny drenaż
- › 4 otwory dla rozmiarów 9 Ch- 21 Ch oraz 6 otworów dla 24 Ch- 36 Ch
- › znaczniki głębokości w odległości 5 cm od ostatniego otworu, niebieska linia kontrastująca w promieniach RTG
- › sterylne, opakowane podwójnie

numer katalogowy	rozmiar	długość
24309	9 Ch	500 mm
24312	12 Ch	500 mm
24315	15 Ch	500 mm
24318	18 Ch	500 mm
24321	21 Ch	500 mm
24324	24 Ch	500 mm
24328	28 Ch	500 mm
24330	30 Ch	500 mm
24333	33 Ch	500 mm
24336	36 Ch	500 mm

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA

z drenem silikonowym



- › zamknięty system do drenażu grawitacyjnego ran
- › dreny wykonane z miękkiego, czystego silikonu z gładko wykończonymi otworami o długości 100 cm z linią widoczną w promieniach RTG
- › silikonowy dren zmniejsza dyskomfort pacjenta oraz pozwala na jego wcześniejszą mobilizację
- › dren zintegrowany z workiem o pojemności 600 ml z zaworem spustowym i zastawką płatkową wyskalowanym w zakresie 0-100ml co 25ml i w zakresie 100-600ml co 100ml
- › zestaw mający zastosowanie przy zabiegach gdzie niewskazane jest zastosowanie drenażu z aktywnym ssaniem
- › sterylne, opakowane podwójnie

numer katalogowy	rozmiar
21409	9 Ch
21412	12 Ch
21415	15 Ch
21418	18 Ch
21420	20 Ch
21424	24 Ch
21428	28 Ch
21430	30 Ch
21433	33 Ch
21436	36 Ch


opakowanie zbiorcze 20 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

DRENY JACKSON-PRATT Z SILIKONU

z trokarem lub bez

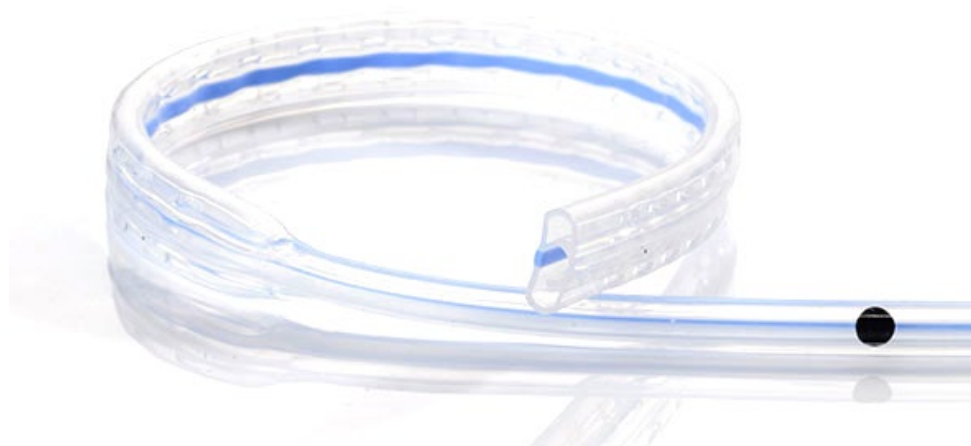

- › wykonane z miękkiego, czystego silikonu
- › przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego
- › duża ilość małych otworów na długości 20 cm, długość całkowita około 100 cm
- › znacznik głębokości w odległości 5 cm od ostatniego otworu, niebieska linia kontrastująca w promieniach RTG
- › dostępne w wersji płaskiej i okrągłej, z trokarami lub bez
- › płaskie dreny posiadają wewnątrz karbowania całkowicie zapobiegające ich zatykaniu
- › dostarczane razem z łącznikiem stożkowym
- › sterylne, opakowane podwójnie

z trokarem	bez trokara	rodzaj drenu	rozmiar	długość
24111	24110	płaski	3 x 7 mm	100 cm
24131	24130	płaski	4 x 10 mm	100 cm
24141	24140	płaski	4 x 13 mm	100 cm
24201	24200	okrągły	7 Ch	100 cm
24211	24210	okrągły	10 Ch	100 cm
24221	24220	okrągły	15 Ch	100 cm
24231	24230	okrągły	19 Ch	100 cm

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

DRENY TKANKOWE Z PCW

Yeates




- › wielokanałowy dren wykonany z miękkiego, medycznego PCW z linią RTG
- › podwójny system drenażu: przez światło kanalików oraz ich zewnętrzne ścianki
- › możliwość zmniejszania szerokości drenu poprzez odrywanie kanalików
- › sterylne, opakowane podwójnie

numer katalogowy	szerokość	długość	ilość kanałów
300/240/090	25 mm	250 mm	9
300/240/180	50 mm	250 mm	18

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

DRENY DACHÓWKOWE Z PCW do ran chirurgicznych

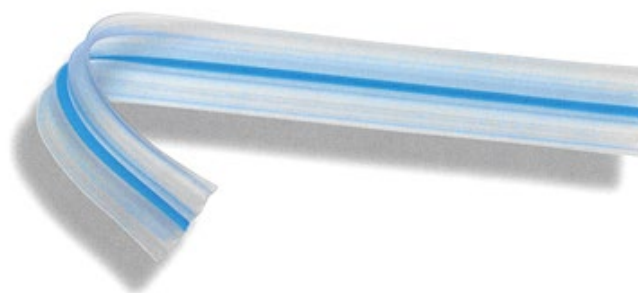

- › wielokanałowy dren wykonany z miękkiego, medycznego PCW z linią RTG
- › falisty przekrój zapewniający kapilarny drenaż
- › dostarczane ze spinką do mocowania drenu
- › sterylne, opakowane podwójnie

numer katalogowy	szerokość	długość
700/380/030	25 mm	250 mm
700/380/060	25 mm	400 mm

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

DRENY PENROSE Z SILIKONU

otwarte lub zamknięte



- › wykonane z miękkiego, czystego silikonu
- › przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego
- › dostępne w wersji otwartej (płaskiej) lub zamkniętej z linią widoczną w promieniach RTG
- › drenowanie kapilarne
- › dzięki specjalnej budowie dreny się nie zaklejają co zapewnia ciągłe drenowanie
- › sterylne, opakowane podwójnie

długość 30 cm	długość 50 cm	rodzaj drenu	rozmiar
22206	22006	zamknięty	6 mm
22208	22008	zamknięty	8 mm
22210	22010	zamknięty	10 mm
22212	22012	zamknięty	12 mm
22214	22014	zamknięty	14 mm
22216	22016	zamknięty	16 mm
22240	22040	otwarty	40 mm

opakowanie zbiorcze 20 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

DRENY REDON Z PCW

z trokarem lub bez



- › wykonane z transparentnego, medycznego PCW
- › posiadają linię widoczną w promieniach RTG
- › naprzemiennie położone otwory zmniejszają ryzyko okluzji
- › posiadają 3 znaczniki głębokości w odległości 5 cm od ostatniego otworu
- › fenestracja na długości 15 cm
- › dostępne w wersji z trokarem
- › sterylne, opakowane pojedynczo

z trokarem	bez trokara*	rozmiar
24006	24020	6 Ch / 50cm
24007	24022	8 Ch / 50cm
24010	24032	10 Ch / 50cm
24013	24042	12 Ch / 50cm
24014	24047	14 Ch / 50cm
24017	24057	16 Ch / 50cm
24018	24060	18 Ch / 50cm

opakowanie zbiorcze 25/50* sztuk

AKME

DRENY KEHR'A z silikonu



- › wykonane z miękkiego, czystego silikonu
- › w kształcie litery T przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegów woreczka żółciowego
- › znaczniki głębokości co 5 cm oraz linia widoczna w promieniach RTG
- › dostarczane razem z łącznikiem schodkowym
- › sterylne, opakowane podwójnie

numer katalogowy	wielkość	rozmiar
24409	20 cm/ 50 cm	9 Ch
24412	20 cm/ 50 cm	12 Ch
24415	20 cm/ 50 cm	15 Ch
24418	20 cm/ 50 cm	18 Ch
24421	20 cm/ 50 cm	21 Ch
24424	20 cm/ 50 cm	24 Ch


opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

DRENY KANAŁOWE Z SILIKONU – SMART

z trokarem lub bez

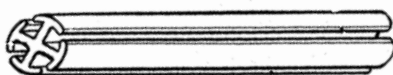

- › wykonane z miękkiego, czystego silikonu, widoczne w promieniach RTG
- › dzięki konstrukcji 4-kanałowej powierzchnia drenowania jest dużo większa w porównaniu z drenami klasycznymi co pozwala na użycie drenu o mniejszej średnicy
- › mniejsza średnica jest dużo bardziej komfortowa dla pacjenta i pozwala na jego wcześniejszą mobilizację
- › gładkie połączenie z drenem łączącym nie zmniejszające światła minimalizuje dyskomfort pacjenta przy usuwaniu drenu
- › znacznik głębokości 5 cm od początku kanałów
- › drenowanie kapilarne
- › dostarczane wraz z łącznikiem stożkowym
- › sterylne, opakowane podwójnie

z trokarem	bez trokara	rozmiar
24702	24710	10 Ch
24705	24712	12 Ch
24703	24715	15 Ch
24704	24719	19 Ch
-	24724	24 Ch
-	24728	28 Ch
-	24732	32 Ch

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

DRENY KANAŁOWE – COAXIAL z silikonu



- › wykonane z miękkiego, czystego silikonu, widoczne w promieniach RTG
- › oprócz 4 kanałów posiadają również dodatkowy dren pozwalający na drenaż powietrza równoległy z płynem
- › dzięki konstrukcji kanałowej powierzchnia drenażu jest dużo większa w porównaniu z drenami klasycznymi co pozwala na użycie drenu o mniejszej średnicy
- › mniejsza średnica jest dużo bardziej komfortowa dla pacjenta i pozwala na jego wcześniejszą mobilizację
- › gładkie połączenie z drenem łączącym nie zmniejszające światła minimalizuje dyskomfort pacjenta przy usuwaniu drenu
- › część drenująca w wersji standardowej o długości około 25 cm
- › znacznik głębokości 5 cm od początku kanałów
- › drenaż kapilarny
- › dostarczane wraz z łącznikiem stożkowym
- › sterylne, opakowane podwójnie

numer katalogowy	rozmiar
24725	24 Ch
24726	28 Ch
24727	24 Ch wersja krótka
24729	28 Ch wersja krótka

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

SPIRALNE DRENY KANAŁOWE Z SILIKONU

okrągłe lub płaskie, z trokarem lub bez



- › wykonane z bardzo miękkiego, czystego silikonu, część drenująca widoczna w promieniach RTG wykonana z białego silikonu, część łącząca całkowicie przezroczysta
- › dzięki konstrukcji 4-kanałowej powierzchnia drenowania jest dużo większa w porównaniu z drenami klasycznymi co pozwala na użycie drenu o mniejszej średnicy
- › mniejsza średnica jest dużo bardziej komfortowa dla pacjenta i pozwala na jego wcześniejszą mobilizację
- › dzięki spiralnemu ułożeniu kanałów działają w każdym położeniu, również gdy jest pozaginany
- › spiralny układ kanałów stwarza alternatywne drogi drenowania co pozwala na uniknięcie zatkania przez skrzepy
- › znacznik głębokości 5 cm od początku kanałów
- › drenowanie kapilarne
- › dostarczane wraz z łącznikiem stożkowym
- › dostępne w wersji płaskiej lub okrągłej
- › sterylne, opakowane podwójnie

z trokarem	bez trokara	rozmiar
24601	24607	7 Ch
24602	24610	10 Ch
24605	24612	12 Ch
24603	24615	15 Ch
24604	24620	19 Ch
-	24621	24 Ch
24625	24623	3 x 7 mm
24624	24622	4 x 10 mm

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

POJEMNIKI PODCIŚNIENIOWE TYPU BELLOWS

z PCW



- › metalowa sprężyna umieszczona wewnątrz zapewnia odpowiednią siłę ssania przy ograniczonej wielkości pojemnika
- › zawór jednokierunkowy chroni przed powrotem odesanego płynu
- › dren łączący z uniwersalnym łącznikiem schodkowym dostosowanym do drenów Redona o średnicy 6- 18 Ch
- › wyskalowane co 50 ml co umożliwia pomiar objętości odesanego płynu
- › sterylne, opakowane pojedynczo

numer katalogowy	pojemność	dren łączący	podciśnienie
20000	50 ml	+	100 mmHg
21200	200 ml	+	100 mmHg
21215	200 ml	+	200 mmHg
21216	200 ml	-	200 mmHg
20200	500 ml	+	100 mmHg
20225	500 ml	-	100 mmHg
20260	500 ml	+	200 mmHg
20261	500 ml	-	200 mmHg
20700	700 ml	+	100 mmHg
20725	700 ml	-	100 mmHg

opakowanie zbiorcze 20 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

POJEMNIKI TYPU BELLOWS Z PCW

systemy zamknięte z workiem



- › metalowa sprężyna umieszczona wewnątrz zapewnia odpowiednią siłę ssania przy ograniczonej wielkości pojemnika
- › zawór jednokierunkowy chroni przed powrotem odessanego płynu
- › dren łączący z uniwersalnym łącznikiem schodkowym dostosowanym do drenów Redona o średnicy 6- 18 Ch
- › wyskalowany worek z zaworem lub bez
- › sterylne, opakowane pojedynczo

numer katalogowy	pojemność Bellows	zawór spustowy	pojemność worka
21230	200 ml	+	600 ml
21260	200 ml	-	200 ml
21290	200 ml	-	600 ml
20620	500 ml	-	600 ml
20660	500 ml	+	600 ml
12004	-	+	600 ml
12005	-	-	600 ml
12009	-	-	200 ml

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

POJEMNIKI PODCIŚNIENIOWE Z SILIKONU

z workiem lub bez



- › pojemniki wykonane z czystego w pełni transparentnego silikonu
- › systemy do drenażu pooperacyjnego są w stanie wytworzyć niskie podciśnienie, idealne w połączeniu z silikonowymi drenami typu Jackson- Pratt
- › zawór jednokierunkowy chroni przed powrotem odessanego płynu
- › wyskalowany worek
- › sterylne, opakowane podwójnie




numer katalogowy	pojemność pojemnika	zawór spustowy	pojemność worka
10400	100 ml	+	-
10410	200 ml	+	-
10420	400 ml	+	-
22610	100 ml	+	200 ml
22620	200 ml	+	600 ml
22630	200 ml	+	200 ml
22600	400 ml	+	600 ml
12004	-	+	600 ml
12014	-	-	600 ml
12015	-	+	200 ml

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

ŁĄCZNIKI DO DRENÓW z polipropylenu

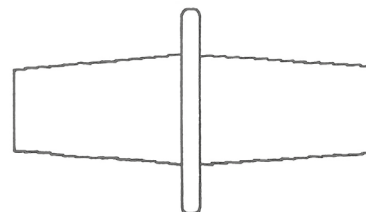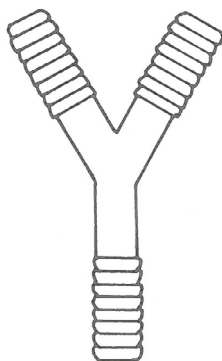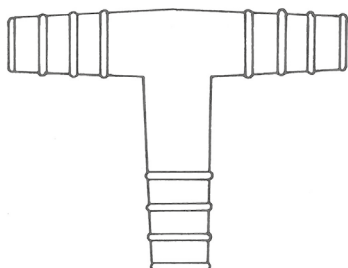

- › wykonane z polipropylenu
- › łączniki Y, proste lub T, schodkowe lub proste
- › niesterylne, nadające się do sterylizacji w temperaturze 134°C

numer katalogowy	średnica wewnętrzna	średnica zewnętrzna	kształt	zakończenie
700/140/000	2 mm	4 mm	Y	męskie
700/140/001	4 mm	6 mm	Y	żeńskie
700/140/002	5 mm	7 mm	Y	schodkowe
700/140/005	7,5 mm	11,5 mm	Y	schodkowe
700/150/630	3 mm	4 mm	I	schodkowe
700/150/634	5 mm	6 mm	I	schodkowe
700/150/640	9 mm	10,5 mm	I	schodkowe
700/160/005	6 mm	9 mm	T	schodkowe
700/160/010	9 mm	11 mm	T	schodkowe

opakowanie zbiorcze 10 sztuk







AKME

ŁĄCZNIKI DO DRENÓW

Y oraz proste








- › łączniki drenów z systemami drenującymi, dostępne w różnych rozmiarach i kształtach
- › kształt "prosty" lub kształt "Y" (umożliwiający równoczesny drenaż z dwóch miejsc)
- › jednorazowego użytku, sterylne

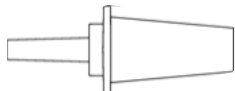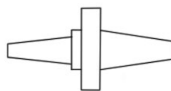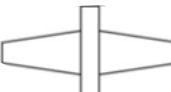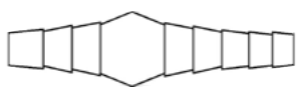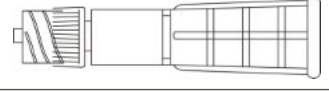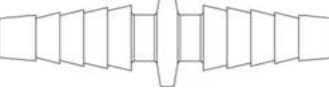numer katalogowy	rozmiar drenów	kształt
10500	A 15 -18 Ch	A 
10501	A 9-12 Ch B 12-19 Ch	A  B
10502	A 12-19 Ch	A 
10503	A 15-21 Ch B 15-24 Ch	A  B
10504	A Luer lock B 16 Ch	A  B
10507	A 24-36 Ch	A  A
10509	A 32-40 Ch	A  A

ŁĄCZNIKI DO DRENÓW

Y oraz proste

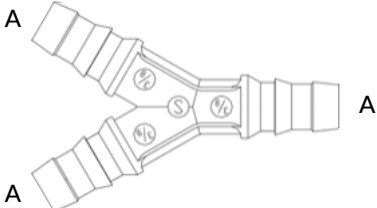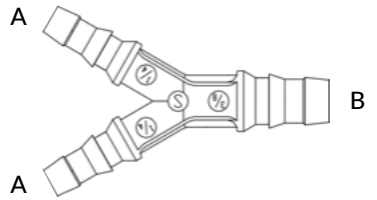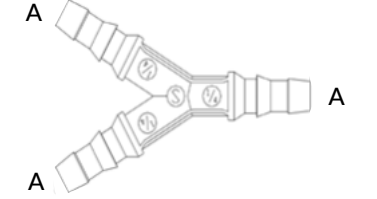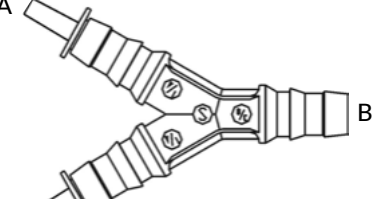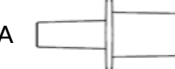numer katalogowy	rozmiar drenów	kształt
10510	A 36-40 Ch	
10515	A 24 - 32 Ch B 36-40 Ch	
10516	A 24- 32 Ch	
10518	A 18-24 Ch B 36-40 Ch	
10523	A 10-12 Ch	
10526	A 24 Ch	
10527	A 18-24 Ch	
10549	A 15-18 Ch	
10551	A 18-24 Ch	
10548	A 36 Ch B LuerLock	

DRENY W ZWOJACH

z silikonu



- › wykonane z czystego w pełni transparentnego silikonu
- › odporne na działanie związków chemicznych, nietoksyczne
- › linia kontrastująca w promieniach RTG na całej długości
- › bardzo elastyczne i giętke, odporne na skręcanie
- › nie ulegają deformacji pod wpływem temperatury, mogą być sterylizowane w autoklawie:
- › 132°C przy ciśnieniu 30 psi przez 10 min
- › 121°C przy ciśnieniu 15 psi przez 15 min
- › gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
- › niesterylne, pakowane pojedynczo w zwojach 15 m

numer katalogowy	średnica (wew. /zew.)
28014	3,35 mm / 4,65 mm
28015	2,64 mm / 4,88 mm
28019	3,18 mm / 6,38 mm
28029	4,80 mm / 9,50 mm
28030	6,40 mm / 9,50 mm
28033	6,40 mm / 11,10 mm
28036	6,00 mm / 12,00 mm
28038	6,40 mm / 12,70 mm
28039	7,90 mm / 12,70 mm
28040	9,50 mm / 12,70 mm
28043	9,50 mm / 14,30 mm
28048	9,50 mm / 15,90 mm

opakowanie zbiorcze 1 sztuka

AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Ceny i realizacja zamówień

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w katalogu są aktualne w dniu oddania do druku. Firma Akme nie odpowiada za niezamierzone błędy w druku i rezerwuje sobie prawo ich usunięcia. Informacje o cenach można uzyskać u naszych Przedstawicieli Regionalnych jak również w naszym Dziale Obsługi Klienta.

Większość zamówień realizowana jest w ciągu 5 dni roboczych od daty zamówienia. W przypadku produktów sprowadzanych na życzenie klienta termin dostawy wynosi od 2 do 4-6 tygodni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia przyjmujemy w formie pisemnej na numer fax: 22 853 50 71 lub e-mail akme@akme.com.pl z wpisaniem tematu ZAMÓWIENIE.

W treści zamówienia należy podać przedmiot zamówienia, dokładne dane do faktury, adres wysyłki oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zamówienie. W sprawie informacji o wysyłce, warunkach płatności i dostępności w danym dniu produktu należy kontaktować się z Naszym Działem Obsługi Klienta.

Warunki dostaw

W przypadku przesyłki o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł netto, koszt dostawy ponosi Zamawiający, w pozostałych przypadkach dostawy odbywają się na koszt firmy AKME chyba, że zostało to uzgodnione inaczej (dotyczy wyłącznie jednostek szpitalnych).

Uszkodzenia towaru w transporcie i niezgodności dostawy z fakturą

Wszystkie dostawy muszą być sprawdzane w momencie dostarczenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności z fakturą należy zachować opakowanie i dokumenty dostawy oraz spisać protokół w obecności przewoźnika.

Reklamacje

Towar wadliwy podlega wymianie. Reklamacja nie będzie uwzględniana w przypadku sprzętu używanego niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania. Reklamacji nie podlega także sprzęt uszkodzony w wyniku niewłaściwego przechowywania.

Zwroty

Zakupiony towar można zwrócić w terminie do 30 dni od daty zakupu. Przed dokonaniem zwrotu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Nie podlega zwrotowi:

1. Towar bez oryginalnego opakowania.
2. Towar z uszkodzonym oryginalnym opakowaniem.
3. Towar, którego opakowanie nosi ślady otwierania lub zostało przez odbiorcę oznakowane.
4. Towar uszkodzony i nienadający się do ponownej sprzedaży.
5. Towar w niepełnym opakowaniu zbiorczym.
6. Towar wykonany na specjalne zamówienie.
7. Towar sprowadzony na specjalne zamówienie.



02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl